

B-type

ノーマルタイプ

2.25mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。インプラント頭部が歯肉から露出しているため、オッセオインテグレーション後、2次外科手術を行わずアバットメントの装着が可能です。

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

 線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長
B3306Sf	φ3.3 / 6.0mm
B3308Sf	φ3.3 / 8.0mm
B3310Sf	φ3.3 / 10.0mm
B3312Sf	φ3.3 / 12.0mm
B3314Sf	φ3.3 / 14.0mm

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
B3706Sf	φ3.7 / 6.0mm
B3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
B3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
B3712Sf	φ3.7 / 12.0mm
B3714Sf	φ3.7 / 14.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
B4006Sf	φ4.0 / 6.0mm
B4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
B4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
B4012Sf	φ4.0 / 12.0mm
B4014Sf	φ4.0 / 14.0mm

φ4.3




製品名	埋入径 / 埋入長
B4306Sf	φ4.3 / 6.0mm
B4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
B4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
B4312Sf	φ4.3 / 12.0mm
B4314Sf	φ4.3 / 14.0mm

φ4.6




製品名	埋入径 / 埋入長
B4606Sf	φ4.6 / 6.0mm
B4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
B4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
B4612Sf	φ4.6 / 12.0mm
B4614Sf	φ4.6 / 14.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

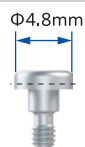


製品名	外径/高さ	金額
CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

CSB-10-s

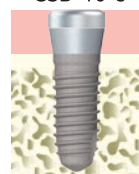

CSB-25-s

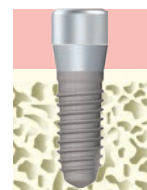

BS-type

ノーマルタイプ

1.45mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。B-typeの歯肉貫通部2.25mmより0.8mm短いタイプです。インプラント頭部が、歯肉貫通部から露出するため、オッセointegration後、2次外科術式を行わずアバットメントの装着が可能です。

付属品 CAP35-s 材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
BS3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
BS3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
BS3712Sf	φ3.7 / 12.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
BS4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
BS4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
BS4012Sf	φ4.0 / 12.0mm

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
BS4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
BS4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
BS4312Sf	φ4.3 / 12.0mm

φ4.6



製品名	埋入径 / 埋入長
BS4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
BS4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
BS4612Sf	φ4.6 / 12.0mm


カバースクリュー 材質：純チタン

	製品名	外径/高さ	金額
	CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
	CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

CSB-10-s



CSB-25-s

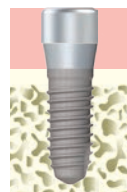

BSN-type

ナロータイプ

ノーマルタイプ

1.7mmの歯肉貫通部を設けたφ3,3mmナロータイプのインプラントです。プラットフォーム最大径はφ4,3mmでEタイプと同じです。Bタイプφ4,8と比べ小さい設計になっていますので、近遠心幅が少ない小臼歯部に適しています。カフの長さもBタイプに比べ短くなっていますので、歯肉が薄いケースに適しています。

付属品 CAP35-s 材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3 ナロータイプ




製品名	埋入径 / 埋入長 / ネジ山径
BSN3308Sf	φ3.3 / 8.0mm / φ3.3
BSN3310Sf	φ3.3 / 10.0mm / φ3.3
BSN3312Sf	φ3.3 / 12.0mm / φ3.3
BSN3314Sf	φ3.3 / 14.0mm / φ3.3

カバースクリュー 材質：純チタン

	製品名	外径/高さ	金額
	CSE-10-s	4.3 / 1.0mm	
	CSE-25-s	4.3 / 2.5mm	

CSE-10-s

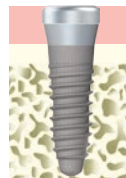

CSE-25-s



E-type

ノーマルタイプ

0.8mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。上顎、下顎ともに前歯部から小臼歯部の症例に適しています。歯肉が薄い症例の場合、インプラント頭部が歯肉部から露出しているため、オッセオインテグレーション後、2次外科手術を行わずアバットメントの装着が可能です。またインプラントを深めに埋入すると2回法としての使用も可能です。

Eタイプを2回法で使用する場合
2回法ノーマルタイプのアバットメントを使用します

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品 CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長
E3310Sf	φ4.0 / 8.9mm
E3312Sf	φ4.0 / 10.9mm
E3314Sf	φ4.0 / 12.9mm

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
E3708Sf	φ4.0 / 6.9mm
E3710Sf	φ4.0 / 8.9mm
E3712Sf	φ4.0 / 10.9mm
E3714Sf	φ4.0 / 12.9mm


φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
E4008Sf	φ4.0 / 6.9mm
E4010Sf	φ4.0 / 8.9mm
E4012Sf	φ4.0 / 10.9mm
E4014Sf	φ4.0 / 12.9mm

カバースクリュー 材質：純チタン E33xx~E40xxSf対応

	製品名	外径/高さ	金額
	CSE-10-s	φ4.3 / 1.0mm	
	CSE-25-s	φ4.3 / 2.5mm	

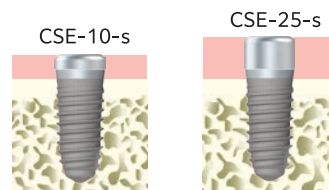

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
E4308Sf	φ4.3 / 6.65mm
E4310Sf	φ4.3 / 8.65mm
E4312Sf	φ4.3 / 10.65mm
E4314Sf	φ4.3 / 12.65mm


φ4.6



製品名	埋入径 / 埋入長
E4608Sf	φ4.6 / 6.65mm
E4610Sf	φ4.6 / 8.65mm
E4612Sf	φ4.6 / 10.65mm
E4614Sf	φ4.6 / 12.65mm

カバースクリュー 材質：純チタン E43xxSf~E46xxSf対応

	製品名	外径/高さ	金額
	CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
	CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

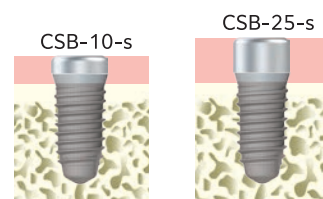

C-type

ノーマルタイプ

歯肉貫通部を持たないインプラントです。前歯部・小臼歯部の審美性を重視する症例に適しています。歯槽骨頂よりも深めの植立が可能のため、植立直後のインプラント周囲への負荷は歯槽骨頂で受けることになり、インプラントはほぼ完全な静置状態に置かれます。そのため、骨質のよくない症例やGBRなどの症例に適しています。



CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
C3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
C3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
C3712Sf	φ3.7 / 12.0mm
C3714Sf	φ3.7 / 14.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
C4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
C4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
C4012Sf	φ4.0 / 12.0mm
C4014Sf	φ4.0 / 14.0mm

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
C4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
C4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
C4312Sf	φ4.3 / 12.0mm
C4314Sf	φ4.3 / 14.0mm

φ4.6



製品名	埋入径 / 埋入長
C4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
C4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
C4612Sf	φ4.6 / 12.0mm
C4614Sf	φ4.6 / 14.0mm

C-type ナロータイプ

歯肉貫通部を持たないφ3.3mmナロータイプのインプラントです。下顎1番中間歯欠損や、骨幅の少ない症例に適しています。破折リスク軽減のため、スクリューを細くすることなくM2ネジを使用しています。そのため嵌合が通常Cタイプと異なりますのでご注意ください。



CAP33-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3 ナロータイプ




製品名	埋入径 / 埋入長 / ネジ山径
C3308Sf	φ3.3 / 8.0mm / φ3.3
C3310Sf	φ3.3 / 10.0mm / φ3.3
C3312Sf	φ3.3 / 12.0mm / φ3.3
C3314Sf	φ3.3 / 14.0mm / φ3.3

テーパー嵌合タイプアバットメントは使用不可

CタイプのHEX嵌合タイプアバットメントは全てで使用できます。
※嵌合(テーパー部)が浅いため、アバットメント、ヒーリングキャップの露出が、1.02mm程長くなります

C-type C-type
ナロータイプ

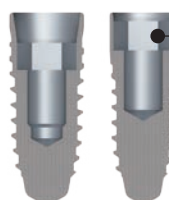

嵌合が浅い

St-type

ノーマルタイプ

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

先端はしっかりと皮質骨をとらえる
ファインエッジがあり、歯冠側頸部には
リバーステーパー、プラットホーム
チェンジング形態が付与されているため
審美性に優れています。軟らかい骨
でも優れた初期固定が期待できます。

インプラント

φ4.0



製品名 埋入径 / 埋入長

St4008Sf φ4.0 / 8.0mm

St4010Sf φ4.0 / 10.0mm

St4012Sf φ4.0 / 12.0mm

St4014Sf φ4.0 / 14.0mm

φ4.3



製品名 埋入径 / 埋入長

St4308Sf φ4.3 / 8.0mm

St4310Sf φ4.3 / 10.0mm

St4312Sf φ4.3 / 12.0mm

St4314Sf φ4.3 / 14.0mm

φ5.0



製品名 埋入径 / 埋入長

St5008Sf φ5.0 / 8.0mm

St5010Sf φ5.0 / 10.0mm

St5012Sf φ5.0 / 12.0mm

Me-type

ノーマルタイプ

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

歯根側先端部と歯根側の第1スレッド
側面に粘膜に優しいラウンド形態
が付与されています。歯冠側には埋
入時に高トルクが出るネックロック
形態を付与。また下顎での骨形成高
もセルフタップがなく安全な埋入が
できます。

インプラント

φ4.0



製品名 埋入径 / 埋入長

Me4008Sf φ4.0 / 8.0mm

Me4010Sf φ4.0 / 10.0mm

Me4012Sf φ4.0 / 12.0mm

φ4.3



製品名 埋入径 / 埋入長

Me4308Sf φ4.3 / 8.0mm

Me4310Sf φ4.3 / 10.0mm

Me4312Sf φ4.3 / 12.0mm

φ5.0



製品名 埋入径 / 埋入長

Me5008Sf φ5.0 / 8.0mm

Me5010Sf φ5.0 / 10.0mm

Me5012Sf φ5.0 / 12.0mm

C/Cナロー/St/Me-type


ヒーリングキャップ 材質：純チタン

製品名 外径/高さ 金額

HC-30-s
HC-50-s

φ4.8 / 3.0mm
φ4.8 / 5.0mm


φ4.8mm

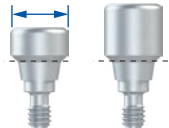

HC-30-s



HC-50-s

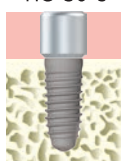

製品名 外径/高さ 金額

HC-30T-s
HC-50T-s

φ4.8 / 3.0mm
φ4.8 / 5.0mm


φ4.8mm



HC-30T-s




HC-50T-s

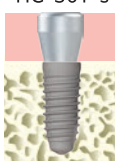

HC-30TW-s
HC-50TW-s

φ5.6 / 3.0mm
φ5.6 / 5.0mm

φ5.6mm

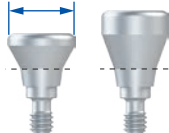

HC-30TW-s




HC-50TW-s



HC-30ST-s
HC-50ST-s

φ3.5 / 3.0mm
φ3.5 / 5.0mm


φ3.5mm

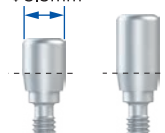

HC-30ST-s



HC-50ST-s

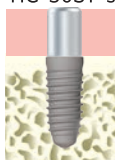

BW-type

ワイドタイプ

Bタイプのワイドタイプです。大臼歯部や単独植立、臼歯部などに適しています。細めのインプラントを選択し植立を行った際、初期固定が得られない状況でのバックアップ用や抜歯窩などの大きな骨欠損部への植立にも対応可能です。

付属品  CAP43-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

インプラント


φ4.7




製品名	埋入径 / 埋入長
BW4708Sf	φ4.7 / 8.0mm
BW4710Sf	φ4.7 / 10.0mm
BW4712Sf	φ4.7 / 12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン


製品名	外径/高さ	金額
CSBW-10-s	φ5.6 / 1.0mm	
CSBW-25-s	φ5.6 / 2.5mm	

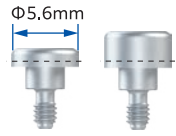

Φ5.6mm



CSBW-10-s



CSBW-25-s

EW-type

ワイドタイプ

Eタイプのワイドタイプです。大臼歯部や単独植立、臼歯部などに適しています。細めのインプラントを選択し植立を行った際、初期固定が得られない状況でのバックアップ用や抜歯窩などの大きな骨欠損部に植立可能なインプラントです。

ショートタイプ

Eタイプのワイドタイプのショートインプラントです。太さφ5mm長さ5mmのショートタイプです。上顎ソケットリフトを回避したいケースや、下顎管近接症例での使用に適しています。また、ネック部が上顎迷入防止仕様になっておりますので、ソケットリフトにも対応可能です。

付属品  CAP43-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

インプラント

φ5.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW5006Sf	φ5.0 / 6.0mm
EW5008Sf	φ5.0 / 8.0mm
EW5010Sf	φ5.0 / 10.0mm
EW5012Sf	φ5.0 / 12.0mm

φ6.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW6006Sf	φ6.0 / 6.0mm
EW6008Sf	φ6.0 / 8.0mm
EW6010Sf	φ6.0 / 10.0mm

φ7.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW7006Sf	φ7.0 / 6.0mm
EW7008Sf	φ7.0 / 8.0mm
EW7010Sf	φ7.0 / 10.0mm

φ5.0 ショートタイプ



製品名	埋入径 / 埋入長
EW5005Sf	φ5.0 / 5.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

製品名	外径/高さ	金額
CSBW-10-s	φ5.6 / 1.0mm	
CSBW-25-s	φ5.6 / 2.5mm	



ヒーリングキャップ 材質：純チタン

製品名	外径/高さ	金額
HCW-30-s	φ4.8 / 3.0mm	
HCW-50-s	φ4.8 / 5.0mm	



HCW-30T-s	φ5.6 / 3.0mm
HCW-50T-s	φ5.6 / 5.0mm



AII-type

ワンピースタイプ

1ピースタイプのインプラントです。支台部に2面カットを付与しています。また、歯肉貫通部との境界部にはマイクロスレッドを設けています。

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 3008-07	φ3.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 3008-09	φ3.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 3010-07	φ3.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 3010-09	φ3.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 3012-09	φ3.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 3012-11	φ3.0 / 12.0mm / 11.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 4008-07	φ4.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 4008-09	φ4.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 4010-07	φ4.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 4010-09	φ4.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 4012-09	φ4.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 4012-11	φ4.0 / 12.0mm / 11.0mm

φ5.0



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 5008-07	φ5.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 5008-09	φ5.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 5010-07	φ5.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 5010-09	φ5.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 5012-09	φ5.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 5012-11	φ5.0 / 12.0mm / 11.0mm