



BBC selection

インプラントツールカタログ

Mytis


Arrow Implant System

お客様の
クオリティオブライフを
目指して

ハイドロリフトシステム

Hydro Lift System

オートクレーブ 121℃

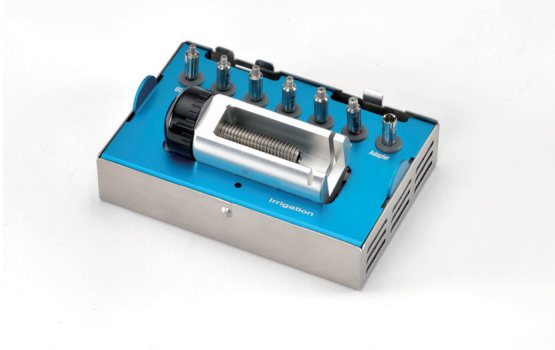

■ 上顎洞粘膜水圧挙上システム

クレスタルアプローチテクニックにより上顎洞底骨を穿孔後、上顎洞底粘膜を水圧により挙上させるシステムです。

<セット内容>

ハイドロチップ (28・30・33・35・38・40)

アダプター

HLS シリコンチューブ

HLS シリンジ

イリゲーション

各 1 個



マグネティック ラテラルアプローチ ドリルキット

Magnetic Lateral Approach Drill Kit

オートクレーブ 121℃



■ ラテラルアプローチシステム

磁石の反発力を使用してラテラルから開窓させるシステムです。

<セット内容>

ウィンドウトレフィン 1 mm・2 mm (φ6.5 mm)

マグネティックドリル 1 mm・2 mm (φ6.5 mm)

ダイヤモンドドリル (φ3.0 mm)

リムーバー (分解・洗浄時使用)

各 1 個

ソケットリーマ

Socket Reamer

オートクレーブ 121℃



■ クレスタルアプローチシステム

削り取られた骨片を骨内で押し上げるとともに、コーティカルボーンディスクを形成。膜とソケットリーマの先端の間にボーンチップを介在させることにより、膜を傷つけずに挙上することが可能です。


<セット内容>

ソケットリーマ (φ2.5・3.0・3.5・4.0)

ハンドレンチ

リーマストッパー (30・45・60・75・90)

各 1 個

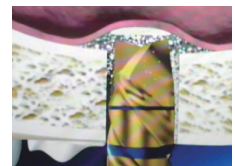

ボーンスプレッダー

Bone Spreader Kit

オートクレーブ 121℃



脆弱な骨質、骨幅がない症状でネジ式ボーンスプレッダーを使用して骨の緻密化、拡大形成するシステムです。

<セット内容>
ボーンスプレッダー
(ϕ 2.2・2.4・2.6・2.8・3.1・3.3・3.5・3.7・4.0・4.5)
各 1 個

ボーンチップメーカー

Bone Chip Maker

オートクレーブ 121℃



ドリルの回転速度により、採取骨の大きさをコントロールできます。

<セット内容>
ボーンチップドリル (ϕ 3.4・3.9・4.2・5.2)
トレフィンバー ϕ 8.0
ドリルストッパー 5・7・10・11.5 mm
ボーンリムーバー
各 1 個

イントロキット

Intro Kit

オートクレーブ 121℃



■ インプラント用 イントロダクションドリル

イントロキットを使用して補綴物の理想的な位置を決められます。

<セット内容>
ポスト (ϕ 6・7.5・9・10.5・12)
ドリルガイド (ϕ 6・7.5・9・10.5・12)
ドリル (ϕ 2.0-8 mm・ ϕ 2.0-10 mm)
ティッシュパンチ (ϕ 4.0・5.0)
リムーバー
各 1 個



パラレルガイド

オートクレープ 121℃

Parallel Guide



パラレルガイドを使用することにより並行性を必要とするオーバーデンチャー等の症例に役立ちます。

<セット内容>

パラレルガイド本体

パラレルガイドピン (φ2.0S・φ2.0L・φ2.5S・φ2.5L)

パラレルガイドスリーブφ2.0 φ2.5 各 1 個

インプラントメジャリングデバイス

オートクレープ 121℃

Implant measuring Device



歯間距離を計測できるインプラントメジャリングデバイスです。計測距離は0 mm～80.0 mmです。

ボーンキャリア

オートクレープ 121℃

Bone Carrier



許容量

φ2.5 → 0.25 cc

φ3.0 → 0.50 cc

抜歯即時埋入、GBR などの症例で骨補填材や採取骨を容易に転入できます。

デプスゲージ

オートクレープ 121℃

Depth Gauge



深度
4-5 mm
7-8 mm
10-12 mm
14-16 mm

先端 φ2.0

ドリリング時に深さを確認するためのゲージです。クレスタルアプローチテクニックで上顎洞底骨を穿孔後に上顎洞底粘膜の状況も確かめられます。

ツールボックス

オートクレープ 121℃

Tools Box



識別表示で埋入操作がわかりやすい。
蓋は着脱可能。より便利に使いやすく。

フリーボックス

オートクレープ 121℃

Free Box



ボックス上段は最大でドリルを 77 本収納可能。
ボックス下段はラバーホルダーを組み替えることにより、先生好みのレイアウトが可能なフリーボックスです。



ツールBOX

オートクレープ 121℃

Compact Tools Box



ドリルやツールをコンパクトに収納します。
ステンレス製。



ツールボックス(補綴用)

オートクレープ 121℃

Prosthetic Tools Box



コンパクトサイズで使用頻度の高いツール類をセットし、複数個持つことで、オベの多い日も安心。




I・G・Pフラップホルダー

オートクレープ 121℃



メインフレームおよびスプリングは症例に合わせて大きさを調整できます。ステンレス製。

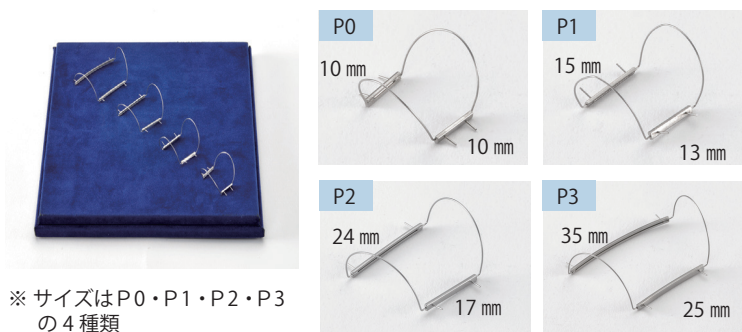


※ サイズはP0・P1・P2・P3の4種類



● I・G・Pフラップホルダー用ピンセット
※ チタン製

● フラップホルダー

マルチピエゾ

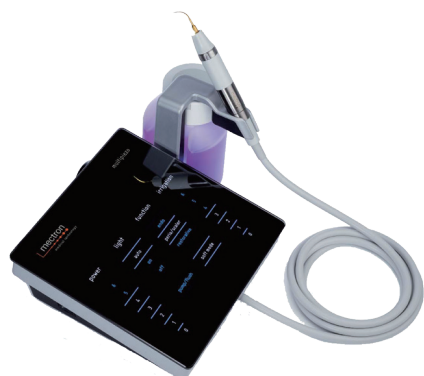

■ 超音波多目的治療器

従来のピエゾ発振方式の機能に加え、抜歯や支台歯形成に有効なパルスモードやスケーリング、ペリオ治療において過敏な患者様に出力を下げることなく振動を弱めるソフトモードを備え、スケーリング、ペリオ、エンド、逆根管洗浄および形成、支台歯形成、抜歯など日常臨床の様々な場面で先生方の診療を低侵襲で効率的にサポートいたします。

<セット内容>

ハンドピース (LED 付)
インサートチップ S1
インサートチップ S6
インサートチップ P10

チップスタンド
トルクレンチ K6
フットスイッチ
各 1 個


BBC UV Active



■ 器材正面有機物の除去・除菌システム

簡単に中の仕切りを移動して使いたいスペース・空間を確保
器材や模型などをセットできます。

UV Active は特殊ランプ光によって
酸化還元電位の低い有機化合物と反
応して C-H 結合が切れ、カルボニ
ル基に起因するピークが新たに発現
し、表面エネルギーを安定させて親
水性を高めます。

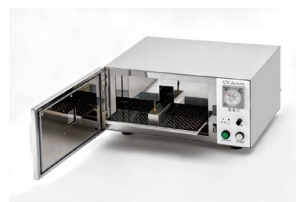

超音波洗浄機



定在波の影響を作らないシステムと独立特殊形状振動体が超音
波洗浄機の改革を実現しました。

- 洗浄槽内に突出した特殊形状振動体が水に調節振動を照射して定在波を制御しています。
- カットングウェーブを作り、洗いムラを抑えます。
- デンチャークリーナーの効果を引き出します。
- 外科用バキュームチップ内や中空ドリル内細かな器具の汚れの洗浄効果が得られます。
- 水深依存症の影響もなく、トレー・器具類も立てて浸漬洗浄ができます。

インプランター Neo PLUS



● コントロールユニット

バックライト付き大型 LCD
8 つの異なるインプラントシステムを記憶可能

● フットペダル

分解式で細部のメンテナンスが可能
幅広い回転レンジと最大 80Ncm の高トルク
オートクレープ・熱水洗浄対応

● ハンドピース



コードの長さ 3.5m
ハンガー標準装備

RAYSCAN CT



■ CT + パノラマ複合機

世界のデザイン賞 2 部門受賞
撮影時間短縮化で低被ばく
独自技術による高精度画質
お待たせしない 3 ステップ撮影

- 省スペース設計 H2296 (Max) × W1500 × D1700 mm
- CD/DVD へのデータ書き込み機能

※詳細は営業担当までお問合せください。

MYTIS NAVIGATION SYSTEM



■ 診断はパノラマからCTシミュレーションへ

● MYTIS MARKER

MYTIS MARKER は「インプラント断面」をはじめ、インプラント臨床医が考案した様々な機能を搭載。より精度高いインプラントシミュレーションを実現します。

● MYTIS GUIDE

MYTIS MARKER のシミュレーション結果を反映することで制度の高い手術を実現。手術時間を短縮し、患者様の負担も軽減します。

MYTIS MARKERラインナップ	価格	CT データ 直接変換	模型合成	データ 作成依頼	ガイド 作製依頼
DIRECT+ CT+ 院内ラボをお持ちの先生に おすすめ!	導入費 460,000円 年間ライセンス費 (初年度無料) 30,000円	○	○	○	○
DIRECT	導入費 240,000円 年間ライセンス費 (初年度無料) 30,000円	○	×	○	○
NETWORK ※ Network のご利用には Direct が 必要です。 ※ Direct で作成した症例データを読み込可。	導入費 110,000円 追加ライセンス (2 本目以降) 20,000円 年間ライセンス費 0円	×	×	○	○
BASIC ※ ICAT にデータ作成発注したデータのみ読 込可能。	導入費 98,000円 年間ライセンス費 0円	×	×	○	○

フルキット	353,000 円 (ドリル35本セット)
標準キット	234,000 円 (ドリル20本セット)
最小キット	110,800 円 (ドリル8本セット)

ドリル	1 本 : 14,000 円
-----	----------------

(すべて税別)


※ Direct・Network は 1 ライセンス、1 PC となります。
※バージョンアップ費はいずれも無料です。

ArrowBone- β -Dental



AG-1

AG-2

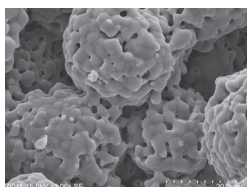

γ線滅菌済

再使用禁止

高度管理医療機器（クラスⅣ）

■ 骨補填剤


生体安全性の高い吸収製歯科用高純度 β -TCP

成分： β -リン酸三カルシウム
内容量：顆粒 0.5~1.0 cc入り / 箱
顆粒サイズ：250 ~ 1000 μ m (AG-1)
1000 ~ 2000 μ m (AG-2)
気孔率：75%

3 箱 × 1 セット

5 箱 × 1 セット

β パウダー

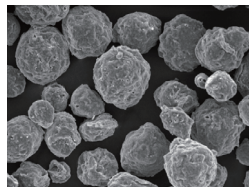

γ線滅菌済

再使用禁止

■ 歯面研磨剤

β パウダーは歯の成分でもある β -TCPを使用した歯面研磨剤です。また、粒子が球状をしていて、汚れをこそぎ落すように清掃するため、歯面を傷つけない歯面研磨剤です。

成分： β -リン酸三カルシウム
内容量：3g×5包 / 箱
平均粒子径：45 μ m

1 箱：3g（1包）×5包入

【製造販売元・販売元】株式会社ブレンベース 住所：東京都品川区大井 1-49-15 YK-17ビル 6 階
電話番号：03-3778-0745 FAX：03-3778-4910

ハイドロリフトシステム	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号 13B1X00145000019
マグネティック ラテラルアプローチ ドリルキット	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号 13B1X00145000021
ソケットリーマ	一般医療機器	手術用ドリルアタッチメント	届出番号 13B1X00145000016
ボーンスプレッダー	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号 13B1X00145000017
ボーンチップメーカー	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号 13B1X00145000020
イントロキット	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号 13B1X00145000022
パラレルガイド	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号 13B1X00145000018
インプラントメジャリングデバイス	一般医療機器	臨床的骨測深器	届出番号 13B1X00145000023
ボーンキャリア	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号 13B1X00145000024
デブスゲージ	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号 13B1X00145000025
I・G・Pフラップホルダー	一般医療機器	歯科用開創器	届出番号 13B1X00145000011
I・G・Pピンセット	一般医療機器	ピンセット	届出番号 13B1X00145000015
ArrowBone-β-Dental	高度管理 医療機器	吸収性歯科用骨再建インプラント材	承認番号 22500BZX00553000
βパウダー	一般医療機器	歯面研磨材	届出番号 13B1X00145000005

【製造販売元】株式会社 ビィ・ソニック 住所：東京都豊島区北大塚 2-3-13-704
電話番号：03-3949-4626 FAX：0120-318-218

UV Active	医療機器	認証番号 13B2X1014000009
超音波洗浄機	医療機器	認証番号 13B2X10146000005

【製造販売元】株式会社ナカニシ 住所：栃木県鹿沼市下日向 700
電話番号：0289-64-3380 FAX：0289-62-5636

IMPLANTOR Neo Plus	医療機器	認証番号 223ALBZX00027A01
--------------------	------	-----------------------

【輸入販売元】東京歯科産業 住所：東京都千代田外神田 6-10-5
電話番号：03-3831-0176 FAX：03-3835-8254

MULTIPIEZO	医療機器	認証番号 2226AFBZI00002000
------------	------	------------------------

【輸入販売元】株式会社メディ・パノラミック 住所：大阪府大阪市西区立売堀 2-5-41 合田ビル 5 F
電話番号：06-4390-4000 FAX：06-4390-4002

【輸入販売元】株式会社 RAY JAPAN 住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 5 階
電話番号：03-3595-2008 FAX：03-3595-2009

RAYSCAN CT	医療機器	認証番号 2226AFBZI00002000
------------	------	------------------------



株式会社ブレンベース

● mail@brain-base.com
● <http://www.brain-base.com>

本社：東京都品川区大井 1-49-15 YK-17ビル6階
電話 03-3778-0745 FAX 03-3778-4910

大阪支社：大阪府大阪市中央区本町橋 2-23
電話 06-6943-8864 FAX 06-6948-8874

許可番号:13B1X00145